



## CentraXX FHIR Custom Export

Titel	CentraXX FHIR Custom Export		
Kunde	Alle		
Datum	22.01.2021		
Ersteller	Jonas Küttner, Mike Wähnert		
Version	1.1		
Verlauf	Version	Beschreibung	Bearbeiter
14.12.2020	0.1	Vorlagen und Agenda	Mike Wähnert
04.01.2021	0.2	Initialer Entwurf	Jonas Küttner
12.01.2021	0.3	Korrekturen	Mike Wähnert
12.01.2021	0.4	Korrekturen	Jonas Küttner
14.01.2021	0.5	- Configs für TLS/SSL - Umfang, Zielgruppe, Scope - UML-Diagramm - Ausleitung in Blaze	Jonas Küttner
16.01.2021	0.6	Ausleitung-Filesystem	Jonas Küttner
18.01.2021	1.0	- Korrekturen - Initiale Release	Mike Wähnert
21.01.2021	1.1	Finale Korrekturen	Jovana Radlović

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Abkürzungsverzeichnis	3
1. Einleitung	4
1.1. Inhalt des Dokuments	4
1.2. Zielgruppe	5
1.3. Überblick über die Schnittstelle	5
2. Einrichtung in CentraXX	6
2.1. Konfiguration der centraxx-dev.properties	6
2.2. Einrichtung eines Projekts	7
2.2.1. ProjectConfig.json	7
2.2.2. ExportResourceMappingConfig.json	12
2.2.3. ResourceBundleExportConfig.json	12
3. Nutzung der Groovy-DSL-Bibliothek	13
3.1. Einleitung/Überblick	13
3.2. Voraussetzungen zur Nutzung der Kairos-FHIR-DSL Bibliothek und des Beispielprojekts	14
3.3. Installation des FHIR-Beispielprojekts	15
3.4. Installation der FHIR-DSL-Bibliothek	15
3.5. Verwendung der DSL-Bibliothek zur Erstellung von Transformations-Skripten	16
3.5.1. Allgemeines	16
3.5.2. CXX JPA Meta Model und die Verwendung von context.source	20
3.5.3. Definition eigener Methoden, um CentraXX-Entitäten optimal abzubilden	21
4. FHIR-Export in Zielsysteme	23
4.1. Ausleitung in einen Blaze Store	25
4.2. Ausleitung ins Dateisystem	27
5. Anhang	28

# Abkürzungsverzeichnis

CXX	CentraXX, siehe <a href="https://www.kairos.de">https://www.kairos.de</a>
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources, siehe <a href="https://hl7.org/FHIR/">https://hl7.org/FHIR/</a>
DSL	Domain-specific language
JPA	Java Persistence API
DKTK	Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung
BBMRI	Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, siehe <a href="https://www.bbmri.de/ueber-gbn/bbmri-eric/">https://www.bbmri.de/ueber-gbn/bbmri-eric/</a>

# 1. Einleitung

## 1.1. Inhalt des Dokuments

Die vorliegende Dokumentation des CentraXX-FHIR-Custom-Exports umfasst folgende Punkte:

- initiale Einrichtung der Schnittstelle für den CentraXX-FHIR-Custom-Export
- Konfiguration des Exports für spezifische FHIR-Projekte
- Einrichtung einer Entwicklungsumgebung und Installation einer Groovy-basierten Kairos-FHIR-DSL-Bibliothek
- Exemplarische Einführung in die Funktionalität der DSL als Grundlage zur Erarbeitung eigener Transformationsskripte.

Zur Einführung in die Nutzung der DSL werden Code-Beispiele aus bereits existierenden Beispiel-Transformationsskripten herangezogen. Dabei wird kontextuell auf Spezifitäten der Programmiersprache "Groovy" eingegangen.

Die vorliegende Dokumentation dient nicht dazu Grundlagen von Groovy und die Prinzipien der Implementation der DSL zu erläutern, oder den HL7-FHIR-Standard einzuführen. An geeigneten Stellen werden weiterführende Links zu den eben genannten Themen referenziert. Weiterhin beinhaltet dieses Dokument auch keine ausführliche Dokumentation der Kairos-FHIR-DSL selbst.

Es wird eine funktionsbreite CentraXX-Instanz vorausgesetzt. Die grundlegende Installation von CentraXX ist ebenfalls nicht Inhalt dieser Dokumentation.

Folgende Programm-Versionen wurden zur Erarbeitung der Dokumentation verwendet:

Programm	Versionsnummer
CentraXX	3.17.1
Kairos-FHIR-DSL-Bibliothek	1.4.0
HL7 FHIR	4.0.1
IntelliJ	2020.3.1
Blaze	0.10.3
Blazectl	0.2.0

## **1.2. Zielgruppe**

Diese Dokumentation richtet sich in erster Linie an Nutzer, welche:

- die Schnittstelle verwalten
- den FHIR-Export für Projekte konfigurieren
- Transformations-Skripte erarbeiten oder bearbeiten.

Zum Verständnis werden grundlegende Erfahrungen in Java und/oder Groovy vorausgesetzt. Ist man mit Java vertraut, lässt sich Groovy schnell erlernen. Zum Erarbeiten der Transformations-Skripte ist außerdem ein Überblick über den HL7-FHIR-Standard von Vorteil. Dieser Standard zum Austausch medizinischer Daten bildet die Grundlage für die hier dokumentierte Schnittstelle.

## **1.3. Überblick über die Schnittstelle**

Der CentraXX-FHIR-Custom-Export erfolgt über eine Export-Schnittstelle. Für einzelne FHIR-Projekte wird der Export spezifisch konfiguriert. Ein Scheduler startet zum konfigurierten Zeitpunkt eine Abfrage der CentraXX-Entitäten. Diese können mittels eines ebenfalls projektspezifisch konfigurierbaren Filters, gefiltert werden. Diese CentraXX-Entitäten werden darauf mit bereitgestellten Groovy-Transformations-Skripten transformiert und entweder an eine Ziel-URL, oder in das Dateisystem ausgeleitet. Der Prozess wird im folgenden UML-Diagramm dargestellt:

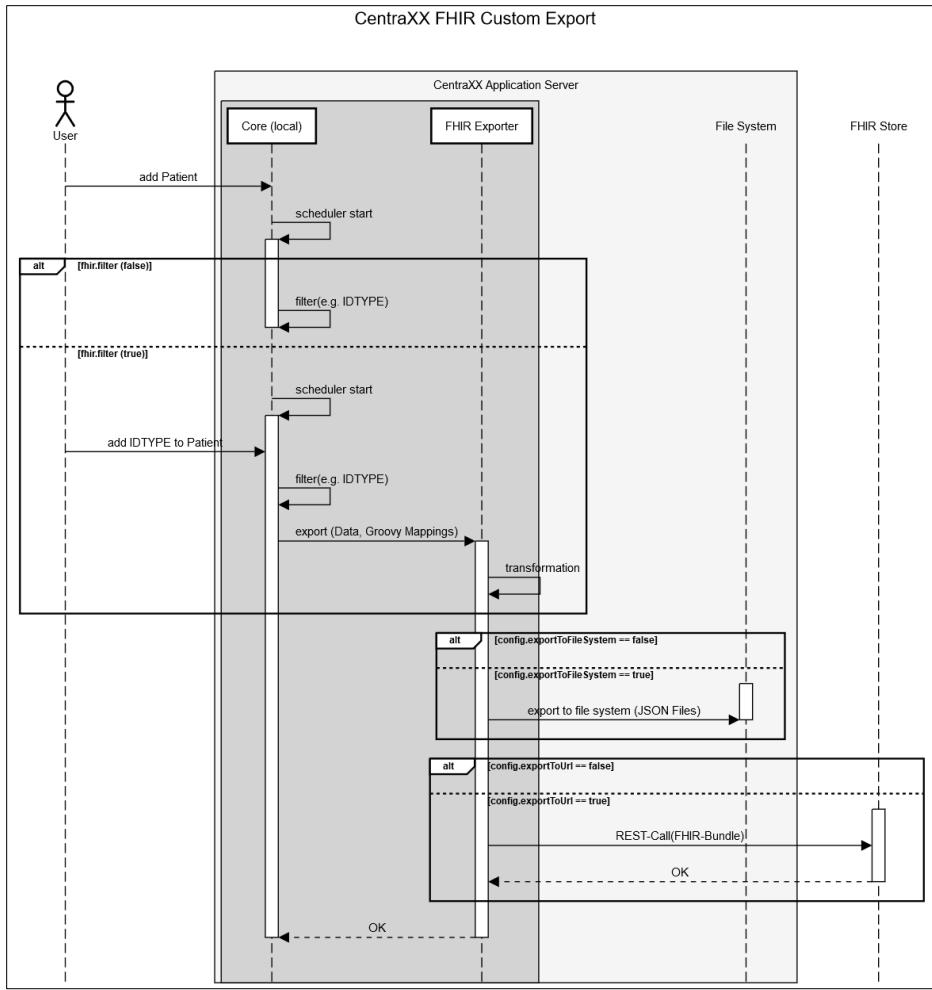


Abbildung 1: CXX FHIR Custom Export

## 2. Einrichtung in CentraXX

### 2.1. Konfiguration der `centraxx-dev.properties`

Zur Nutzung des FHIR-Custom-Exports muss die Schnittstelle aktiviert werden. Hierzu muss das übergeordnete Verzeichnis spezifiziert werden, in welchem die Projekt-Verzeichnisse für die Exporte liegen sollen. Die `centraxx-dev.properties` müssen daher wie folgt konfiguriert werden:

```
interfaces.fhir.nfn.export.enable=true
interfaces.fhir.custom.mapping.dir=C:/applications/centraxx-home/nfn-mappings
```

Das angegebene Verzeichnis muss auf dem CXX-Applikationsserver existieren.

## 2.2. Einrichtung eines Projekts

Die FHIR-Ressourcen sind projektspezifisch definiert. Bei der Einrichtung von Export-Projekten für verschiedene FHIR-Projekte werden für dieselbe CentraXX-Entität demnach auch projektspezifische Transformations-Skripte benötigt. Weswegen die Transformationsskripte und Konfigurationsdateien für jedes Projekt in einem separaten Unterverzeichnis bereitgestellt werden. Als Beispiel hierzu soll ein Projekt zur Transformation der CentraXX-Entitäten in FHIR-Profile des DTKK-Projekts angelegt werden. Dafür ist ein Unterverzeichnis **/dtkk** unter interfaces.fhir.custom.mapping.dir anzulegen. In diesem Verzeichnis sind die Groovy-Transformations-Skripte für dieses Projekt abzulegen. Mit der oben aufgeführten centraxx-dev.properties Konfiguration ist der resultierende Pfad: "C:/applications/centraxx-home/nfn-mappings/dtkk".

Die Transformations-Skripte können ohne CXX-Neustart für den kommenden Export geändert werden.

Nach dem Anlegen eines neuen Projektverzeichnisses und CentraXX-Neustarts werden folgende drei Konfigurationsdateien von CentraXX in diesem Verzeichnis angelegt:

- ProjectConfig.json
- ExportResourceMethodConfig.json
- BundleRequestMethodConfig.json.

### 2.2.1. ProjectConfig.json

Die ProjectConfig.json ist die Basis- Konfigurationsdatei für den FHIR-Export eines Export-Projekts. Diese Konfiguration kann nicht während der Laufzeit geändert werden. CentraXX muss nach Änderungen dieser Datei neu gestartet werden. Die Konfigurationsdatei enthält für jeden Konfigurationsparameter ein Feld „description“, welches die Funktion des Parameters in englischer Sprache erklärt. Dieses Feld dient nur zur Information des Nutzers. In den folgenden Beispielen werden sehr lange Description-Strings – zur vereinfachten Darstellung – mit "..." abgekürzt.

#### Patientenfilter:

Dieser Filter spezifiziert, welche Patientendaten innerhalb des FHIR-Exports eingeschlossen werden. Der Filtertyp und der dazugehörige Filter-Wert werden hierzu spezifiziert.

Die folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:

Filter	Beschreibung
PATIENTSTUDY	Patient gehört zu einer bestimmten Studie im Studienregister. Die Studie wird folgendermaßen spezifiziert: "{studyCode}\${studyProfileCode}", z.B. COVID19\$BASIC.
CONSENTTYPE	Patient besitzt eine Einverständniserklärung eines bestimmten Typs (Code).
ORGUNIT	Patient gehört zu einer bestimmten CentraXX- Organisationseinheit (Code).
FLEXIFLAGDEF	Patient besitzt ein Universalattribut eines bestimmten Universalattribut-Typs (Code).
IDTYPE	Patient besitzt ID eines bestimmten ID-Typs (Code).

Es folgt ein Beispiel zur Konfiguration eines Filters, welcher alle Patienten einschließt die zur Organisationseinheit mit dem Code "CentraXX" gehören:

```
"patientFilterType": {
  "description": "...",
  "value": "ORGUNIT"
},
"patientFilterValue": {
  "description": "...",
  "value": "CentraXX"
},
```

#### **Seitengröße:**

Bestimmt die Größe einer CentraXX-Abfrage und des dazugehörigen FHIR-Bundles. Es wird empfohlen einen kleineren Wert zu wählen, wenn das Zielsystem ein Transaktions-System besitzt (z.B. 10 für CentraXX). Ist dies nicht der Fall, oder im Falle, dass ins Filesystem exportiert werden soll, so kann ein größerer Wert gewählt werden (z.B. 500).

```
"pageSize": {
  "description": "...",
  "value": 10
},
```

#### **Exportzeitraum:**

Legt den Zeitraum des FHIR-Exportvorgangs fest. Die Zeitangabe erfolgt mittels eines sechsstelligen Chron-Ausdrucks. Mit der Standardkonfiguration erfolgt der Export jeden Tag um 12 Uhr. Hierbei sind [Cron-Ausdrücke von Spring](#) zu verwenden.

Als Beispiel die Standardkonfiguration:

```
"exportInterval": {  
  "description": "Sets the export cron interval. Default is once a day.",  
  "value": "0 0 12 * * *"  
},
```

### **Export ins Filesystem:**

Die FHIR-Daten können in das lokale Filesystem exportiert werden. Dazu muss der Export mit folgender Property aktiviert werden:

```
"exportToFileSystem": {  
  "description": "If true, the scheduler will export to the specified file system exportFolder.",  
  "value": true  
},
```

Zudem muss das Zielverzeichnis für den Export angegeben werden. Existiert das angegebene Verzeichnis nicht, wird es von CentraXX neu angelegt:

```
"exportFolder": {  
  "value": "C:/applications/centraxx-home/nfn-export/"  
},
```

### **Export an URL:**

Die FHIR-Ressourcen können per HTTP an externe Zielsysteme transferiert werden. Diese Export-Funktion wird mit folgender Property aktiviert:

```
"uploadToUrl": {  
  "description": "If true, the scheduler will export to the specified uploadUrl REST endpoint.",  
  "value": true  
},
```

Des Weiteren muss die URL des Zielsystems angegeben werden. Diese ist der Endpunkt einer Bundle-Ressource in einem FHIR-Store, wie Blaze oder CentraXX:

```
"uploadUrl": {  
  "value": "http://localhost:9090/fhir"  
},
```

Zur HTTP-Authentifizierung am Ziel-Server wird [BasicAuthentication](#) verwendet.  
Nutzername und Passwort werden folgendermaßen konfiguriert:

```
"uploadUser": {  
    "description": "BasicAuth User name in the target system.",  
    "value": "admin"  
},  
"uploadPassword": {  
    "description": "BasicAuth Password in the target system.",  
    "value": "admin"  
}
```

Verlangt das System keine Authentifizierung, werden die angegeben Daten für Nutzername und Passwort ignoriert.

Weiterführend kann im Falle von "[uploadToUrl = true](#)" die Nutzung einer Validierung der HTTPS Zieladresse konfiguriert werden. Mit folgender Konfiguration wird spezifiziert, ob allen Zertifikaten vertraut werden kann:

```
"sslTrustAllEnable": {  
    "description": "If true, all ssl/tls certificates are trusted, otherwise the default java store is used for  
SSL/TLS verification.",  
    "value": true  
},
```

Ist die Option auf "false" gesetzt, wird der Standard-Truststore (Java TrustStore) verwendet. Im Falle, dass auch beispielsweise system-spezifischen Zertifikaten vertraut werden kann, so können diese in einem benutzerdefinierten Truststore abgelegt werden. Als Truststore ist eine [Java KeyStore](#)-Datei (.jks) zu verwenden. Zudem sind der Pfad der Truststore-Datei im Dateisystem und das Passwort zu konfigurieren:

```
"trustStoreEnable": {  
    "description": "...",  
    "value": true  
},  
"trustStore": {  
    "value": "C:/centraxx-home/nfn-truststore.jks"  
},  
"trustStorePassword": {  
    "value": "changeit"  
},
```

Für den FHIR-Export können außerdem das Login für die Anfragen und Antworten der HTTP-Requests konfiguriert werden. Das kann hilfreich zur Initialisierung und zum

Testen sein. Wird bspw. ein neuer Export konfiguriert, welcher per HTTP in einen FHIR-Store ausleitet, so können die gesendeten FHIR-Ressourcen und die HTTP-Antworten des Zielservers eingesehen werden. Die Messages werden standardmäßig innerhalb des Serverlogs geloggt.

Mit folgender Option kann die HTTP-Message-Body, sprich das gesendete FHIR-Bundle, geloggt werden. Die Konfiguration "prettyPrintEnable" bietet hierbei die Option diese Nachrichten für den Nutzer leserlich strukturiert zu loggen.

Hierbei gilt es zu beachten, dass die Aktivierung dieser Optionen bei einer hohen Anzahl von auszuleitenden Entitäten, den Serverlog schnell füllen werden.

```
"prettyPrintEnable": {  
    "description": "Print style the HTTP message body.",  
    "value": false  
},  
"fhirMessageLoggingEnable": {  
    "description": "If true, HTTP message requests are logged in CentraXX separately.",  
    "value": false  
},
```

Die HTTP-Antwort des Zielservers kann ebenfalls geloggt werden. Dazu muss folgende Option aktiviert sein:

```
"fhirResponseLoggingEnable": {  
    "description": "If true, HTTP message responses are logged in CentraXX separately.",  
    "value": false  
},
```

FHIR- Ressourcen werden Bundle-weise exportiert und in das Zielsystem eingeschleust. Ein solches Bundle kann bspw. Daten von fünf Exemplaren der FHIR-Ressource 'Patient' enthalten. Bei der Verarbeitung des HTTP-Request könnten z.B. vier der Patienten aus der Bundle-Ressource erfolgreich importiert werden, jedoch der Import für einen fehlschlagen. In diesem Fall wird jedoch trotzdem eine positive HTTP-Antwort (200 OK) erzeugt. Um den Import jeder einzelnen im Bundle enthaltenen FHIR-Ressource zu validieren, muss somit die Antwort geparsst und jeder Eintrag gegen die zugehörige FHIR-Ressource validiert werden. Diese Validierung wird mit folgender Konfiguration aktiviert:

```
"fhirResponseValidationEnable": {  
    "description": "...",  
    "value": false  
}
```

## 2.2.2. ExportResourceMappingConfig.json

Diese Konfiguration verknüpft eine CentraXX-Entität mit einer FHIR-Ressource über ein Groovy-Transformations-Skript (groovy-Mapping). Die gleiche CentraXX-Entität kann so konfiguriert werden, dass sie über verschiedene Transformations-Skripte auf die gleiche FHIR-Ressource abgebildet werden. Diese Konfiguration kann während der Laufzeit geändert werden und benötigt keinen Neustart von CentraXX. Die Reihenfolge der Mappings ist wichtig, wenn das Zielsystem die referentielle Integrität prüft (z.B. Blaze Store).

Folgend ein Beispiel für einen Eintrag in ExportResourceMappingConfig.json:

```
{  
  "selectFromCxxEntity": "ORGANIZATION_UNIT",  
  "transformByTemplate": "organisation",  
  "exportToFhirResource": "Organization"  
},
```

Hier werden demnach Daten der CentraXX-Entität "ORGANIZATION\_UNIT" mittels der Transformationsvorlage "organisation" auf die FHIR-Ressource "Organization" abgebildet. Das korrespondierende Transformations-Skript ist dann das Groovy-Skript das nach dem oben eingeführten Beispiel unter "C:\applications\centraxx-home\fnf-mappings\organisation.groovy" liegt.

**Hinweis:**

**Die Einträge in der Standard-Version (bei der Projekt-Erstellung von CentraXX erzeugt), spezifizieren zugleich auch alle CentraXX-Entitäten für die derzeit Ausleitungen möglich sind!**

## 2.2.3. ResourceBundleExportConfig.json

Für den Export der FHIR-Ressourcen an eine Ziel-URL, können verschiedene HTTP-Methoden für unterschiedliche FHIR-Ressourcen-Typen verwendet werden. Welche HTTP-Methoden für welchen Ressourcen-Typ zu verwenden ist, hängt vom Zielsystem ab. In der ResourceBundleExportConfig.json Konfigurationsdatei wird den einzelnen FHIR-Ressourcen-Typen eine HTTP-Methode zugeordnet. Diese Konfiguration kann während der Laufzeit geändert werden.

Die Konfiguration könnte wie folgt aussehen:

```
{
  "description": "...",
  "resourceTypeToHttpMethod": {
    "Patient": "PUT",
    "Specimen": "PUT",
    "Condition": "PUT",
    "Encounter": "PUT",
    "Observation": "PUT",
    "Procedure": "PUT",
    "Organization": "PUT",
    "MedicationStatement": "PUT",
    "ClinicalImpression": "PUT"
  }
}
```

Ist ein Ressourcen-Typ nicht konfiguriert, so wird "PUT" als Voreinstellung verwendet. Der Blaze Store (v.8.0) akzeptiert bspw. ausschließlich PUT-Requests. CentraXX nutzt "PUT" zum Anlegen, oder Update über die "logical id" einer FHIR-Ressource. "POST" wird zum Anlegen, oder Update über den "natural identifier" (nur Patient, Specimen) genutzt.

## 3. Nutzung der Groovy-DSL-Bibliothek

### 3.1. Einleitung/Überblick

DSL steht für "domain specific language". Eine DSL soll also eine intuitive benutzbare Sprache bieten, um Probleme einer spezifischen Domäne lösen zu können. Die Kairos-FHIR-DSL wurde entwickelt um möglichst einfach Transformation-Skripte zu schreiben, mit denen CentraXX-Entitäten auf benutzerspezifische FHIR-Profile abgebildet werden können. Somit wird ein standardisierter Datenaustausch zwischen CentraXX und anderen FHIR-basierten Systemen ermöglicht. Die Kairos-FHIR-DSL ist in der Programmiersprache [Groovy](#) realisiert. Dementsprechend sind auch die Transformation-Skripte in Groovy zu schreiben. Um mit der DSL arbeiten zu können sind grundlegende Kenntnisse in Java empfehlenswert. Groovy ist stark an Java angelehnt und kann somit schnell erlernt werden. Groovy bietet allerdings einige Spezifikationen, wie Vereinfachung von Syntax. Dies bietet die Möglichkeit einen kompakteren und besser lesbaren Code zu schreiben. Zusätzlich unterstützt Groovy sowohl dynamische, als auch statische Typisierungen und daher eignet sie sich auch gut als Skriptsprache.

Es liegen bereits Beispiel-Skripte für die Transformation von CentraXX-Entitäten zu FHIR-Profilen vor, welche in Form eines Groovy-Projekts heruntergeladen werden

können. Dieses Projekt enthält einige Transformations-Skripte, in welchen eine Groovy-spezifische Syntax genutzt wird. Ausschnitte aus diesen Beispielen werden im weiteren Verlauf der vorliegenden Dokumentation exemplarisch erläutert. Für folgende FHIR-Projekte existieren bereits Beispiel-Skripte:

- [DKTK](#)
- [BBMRI](#)
- CentraXX zu CentraXX

Die Kairos-FHIR-DSL-Bibliothek ist in diesem Projekt bereits eingebunden. Selbstverständlich kann sie aber auch in eigene Groovy-Projekten installiert werden. Zum Erstellen und Editieren der Groovy-Skripte werden ausgewählte Entwicklungstools benötigt. Der Download und die Installation aller benötigten Programme werden folgend beschrieben.

## **3.2. Voraussetzungen zur Nutzung der Kairos-FHIR-DSL Bibliothek und des Beispielprojekts**

- [IDE mit Maven und Groovy Support, z.B. IDEA IntelliJ, Eclipse, etc.](#)

Um die Groovy-Transformationsskripte zu erarbeiten, wird eine Entwicklungsumgebung genutzt. Im Folgenden wird die Einrichtung mit IDEA IntelliJ beschrieben. Die derzeit kostenfreie Community-Edition ist hierfür ausreichend.

Den Installer finden Sie [hier](#).

- [Adopt-JDK 1.8](#)

Zur Nutzung der FHIR-Bibliothek wird derzeit ein Java Development Kit 8 benötigt. Der Windows-Installer kann [hier](#) heruntergeladen werden. Wählen Sie bei der Installation "JAVA\_HOME Variable konfigurieren" aus.

- [Maven](#)

Zur Verwaltung der Bibliotheken wird Maven genutzt. IntelliJ selbst kommt mit einem vorinstallierten Maven. Damit Maven über die Kommandozeile genutzt werden kann, was zur Installation der Kairos-FHIR-DSL Bibliothek für eigene Groovy-Projekte sehr hilfreich ist, muss es zum "Path" hinzugefügt werden. Fügen Sie dazu der Systemvariable "Path" den Pfad "[IntelliJ]\plugins\maven\lib\maven3\bin" hinzu.

Es kann auch ein eigenes Maven installiert werden. Maven kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: <https://maven.apache.org/download.cgi>  
Maven wird nach folgender Anleitung installiert: <https://maven.apache.org/install.html>.

#### **Konfiguration eines benutzerspezifischen Maven:**

Im Falle, dass nicht das Maven verwendet werden soll, welches mit IntelliJ vorinstalliert wird, kann dieses in IntelliJ einfach geändert werden. Dies lässt sich unter File → Settings → Build, Execution, Deployment → Build Tools → maven, konfigurieren. An dieser Stelle muss der "maven home path" auf "[custom-maven]/bin" gesetzt werden.

#### **Konfiguration des JDK 8 als Projekt-JDK:**

Um das benötigte JDK 8 für das Projekt zu nutzen, muss dieses in IntelliJ konfiguriert werden. Gehen Sie dazu unter File → Project Structure... → Project und setzen Sie hier unter "Project SDK" den Pfad auf das Adopt-JDK 8. Wenn der Standard-Pfad bei der Installation nicht geändert wurde, dann sollte "C:\Program Files\AdoptOpenJDK\jdk-8.0.275.1-hotspot" gewählt werden.

### **3.3. Installation des FHIR-Beispielprojekts**

Es existiert ein Beispiel-Projekt, welches Groovy-Mappings für verschiedene Projekte bereithält. Diese umfassen momentan Mappings für die Projekte DTK, BBMRI (GBA/GBN) und CXX (CentraXX zu CentraXX-Synchronisation per FHIR). Dieses Projekt kann [hier](#) heruntergeladen werden. Wählen Sie auf der verlinkten Seite dazu "kairos-fhir-dsl-mapping-example" und klicken Sie auf "Herunterladen". Anschließend entpacken Sie die heruntergelade Zip-Datei in ein passendes Verzeichnis. Das Projekt kann nun in IntelliJ über File → Open... geöffnet werden. Wählen Sie hierzu den Pfad des eben entpackten Projekts und bestätigen Sie es mit "OK". Nachfolgend wird unten rechts eine Infobox "Maven build script found" erscheinen. Klicken Sie dort auf "Import". Anschließend müssen gegebenenfalls noch das Project-JDK und Maven, wie oben beschrieben, konfiguriert werden.

### **3.4. Installation der FHIR-DSL-Bibliothek**

Jetzt kann die FHIR-DSL-Bibliothek installiert werden. Gehen Sie hierzu auf auf den folgenden [Link](#), wählen Sie "kairos-fhir-dsl" aus und laden es herunter. Entpacken Sie das heruntergeladene zip-file. Installieren Sie nun die Bibliothek in Ihr lokales Maven-Repository, indem Sie folgenden Command in einer Kommando-Zeile ausführen:

```
mvn org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:2.5.2:install-file -Dfile=<path-to-file>
```

Nun wird ein neues Projekt in IntelliJ erstellt. Im Dialog muss links Groovy ausgewählt werden und im nächsten Fenster wird das Projektverzeichnis konfiguriert. Im Projekt-Fenster (links) des neu erstellten Projekts (Projekt-Verzeichnis) wählen Sie mit Rechtsklick auf das Projektverzeichnis "Add Framework Support...". Wählen Sie "Maven" aus und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK". Hierdurch wird eine "pom.xml" Datei erstellt. Innerhalb dieser muss folgender Eintrag hinzugefügt werden, sodass die Kairos-FHIR-DSL-Bibliothek in das Projekt eingebunden werden kann:

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>de.kairos</groupId>
    <artifactId>kairos-fhir-dsl</artifactId>
    <version>1.4.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Um die Änderungen neu zu laden geht man in das rechte Maven-Fenster → "Reload All Maven Projects". Darauffolgend müssen gegebenenfalls noch das Project-JDK und Maven, wie oben beschrieben, konfiguriert werden.

## 3.5. Verwendung der DSL-Bibliothek zur Erstellung von Transformations-Skripten

### 3.5.1. Allgemeines

Groovy bietet mit Closures ein Sprachelement, dass für die Entwicklung einer DSL maßgeblich ist. Closures sind Code-Blöcke, die in Groovy als Klasse behandelt werden und damit auch als Argumente an Methoden übergeben werden können. In Closures selbst können wiederum Methoden aufgerufen werden. Dies wird genutzt, um eine intuitive Syntax zur Abbildung von FHIR-Profilen zu bieten. Um bei Interesse Groovy-Closures und -Delegations besser verstehen zu können, wird die folgende [Groovy-Dokumentation](#) empfohlen.

Über die Delegations-Strategie kann bestimmt werden, welche Methoden in einem Closure aufgerufen werden können. Beim Aufruf einer solchen Methode, wird zur Laufzeit versucht die entsprechenden Implementationen der im Closure aufgerufenen Methode über den Delegations-Mechanismus zu finden. Um als Nutzer die DSL verwenden zu können, wird die Information benötigt, welche Methoden in welchen Closures aufgerufen werden können. Dies wird bei der Entwicklung der DSL in Groovy, mittels Annotationen realisiert. Dadurch wird eine Auto-Code-Vervollständigung in der Entwicklungsumgebung ermöglicht.

Im Folgenden soll das Prinzip des Closures und weiterer Groovy-Spezifitäten aufgeführt werden, die zur Erstellung von Transformations-Skripten genutzt werden können. Dazu wird das Groovy Skript "patient.groovy" betrachtet, dass im Beispielprojekt unter \src\main\java\projects\dktk\patient.groovy vorzufinden ist. Dieses Skript bildet die CentraXX-Entität PatientMasterDataAnonymous auf das [DKTK FHIR-Profil "patient"](#) ab.

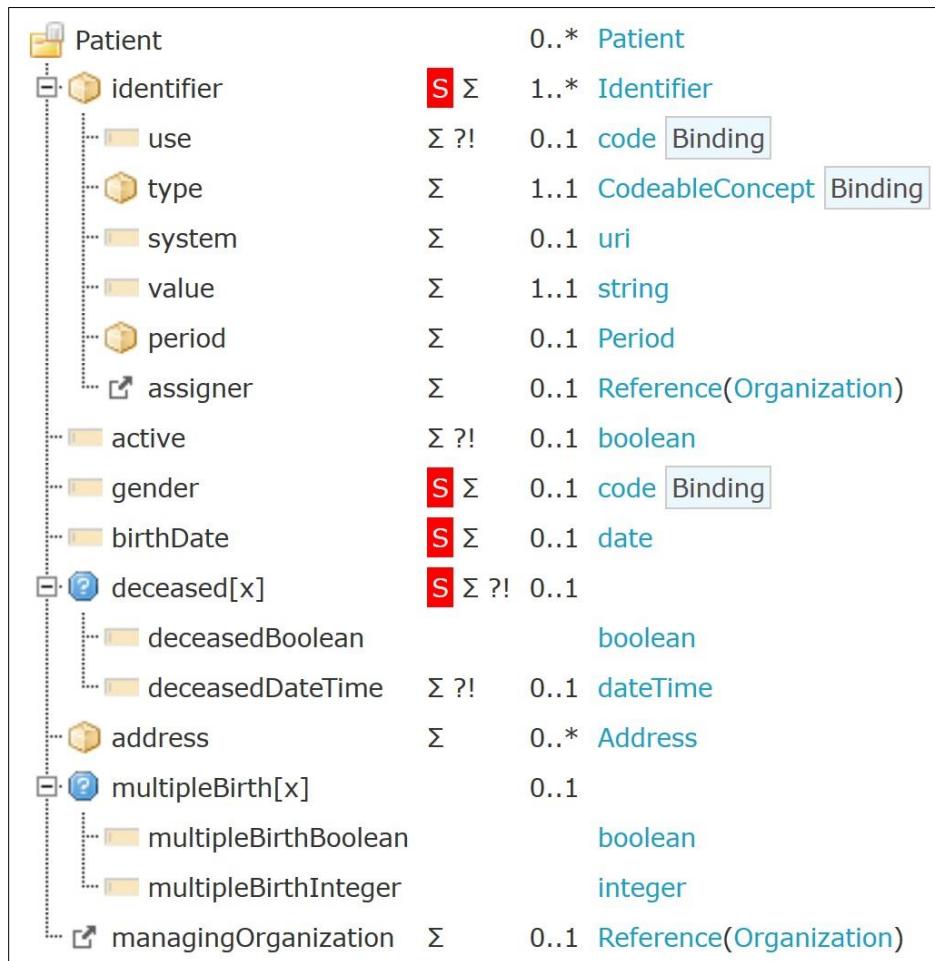


Abbildung 2: Struktur FHIR-Profil

Die Kairos-FHIR-DSL repräsentiert die Struktur des FHIR-Profil. Die in der Bibliothek bereitgestellten Methoden tragen die Namen der zugehörigen Elemente eines FHIR-Profil. Es wird daher zunächst die äußere Methode "patient" aufgerufen. Diese akzeptiert ein Closure als Argument. Hier werden zuerst zwei generelle Elemente einer FHIR-Ressource festgelegt. Für das FHIR-Profil werden die Elemente "id" und "meta" gesetzt und deshalb können in diesem Closure die Methoden "id" und "meta" aufgerufen werden. Die [Basis-Definition einer FHIR-Resource](#) sieht folgendermaßen aus:

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Resource	N	n/a		Base Resource
id	Σ	0..1	id	Logical id of this artifact
meta	Σ	0..1	Meta	Metadata about the resource
implicitRules	?! Σ	0..1	uri	A set of rules under which this content was created
language		0..1	code	Language of the resource content <a href="#">Common Languages</a> ( <a href="#">Preferred</a> but limited to <a href="#">AllLanguages</a> )

Das Element "id" ist ein "Simple Type", es besitzt demnach einen Wert. Das Element "meta" ist wiederum ein "Complex Type" und kann folglich verschiedene Unterelemente besitzen. Im Detail sieht die Definition des komplexen Elements "meta" wie folgt aus:

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Meta	Σ N		Element	Metadata about a resource
versionId	Σ	0..1	id	Elements defined in Ancestors: <a href="#">id</a> , <a href="#">extension</a> Version specific identifier
lastUpdated	Σ	0..1	instant	When the resource version last changed
source	Σ	0..1	uri	Identifies where the resource comes from
profile	Σ	0..*	canonical(StructureDefinition)	Profiles this resource claims to conform to
security	Σ	0..*	Coding	Security Labels applied to this resource <a href="#">SecurityLabels</a> ( <a href="#">Extensible</a> )
tag	Σ	0..*	Coding	Tags applied to this resource <a href="#">Common Tags</a> ( <a href="#">Example</a> )

Damit werden auch die Methodenaufrufe im Groovy-Skript ersichtlicher. Prinzipiell repräsentieren diese, die Struktur des FHIR-Profil.

```
patient {
  id = "Patient/" + context.source["patientcontainer.id"]

  meta {
    profile "http://dktk.dkfz.de/fhir/StructureDefinition/onco-core-Patient-Pseudonym"
  }
  ...
}
```

Im Closure, welches die Methode "patient" als Argument akzeptiert, dürfen die Methoden "id", "meta", "implicitRules" und "language" aufgerufen werden, da diese entsprechend in der Struktur-Definition des FHIR-Profil für eine Resource definiert sind. In IntelliJ kann das überprüft werden, indem ein gewünschter Element-Namen eingegeben wird. Dieser wird darauffolgend direkt von der Auto-Code-Vervollständigung angezeigt.

Im Beispiel wird außerdem dem Feld "id" ein String zugewiesen. In Groovy können Klassen sogenannte Properties besitzen, welchen mit dieser Syntax direkt ein Wert zugewiesen werden kann. In Java entspricht eine Property einem "private" Feld einer Klasse. Diese Zuweisung ist somit analog zum Aufruf der zugehörigen Setter-Methode. Groovy bietet für Properties von Klassen direkt Setter- und Getter-Methoden an, ohne

dass diese implementiert werden müssen. Die oben gezeigte Zuweisung kann alternativ wie folgt geschrieben werden:

```
patient {  
    setId "Patient/" + context.source["patientcontainer.id"]  
    ...  
}
```

Der Ausdruck "context.source" wird weiter unten ausführlicher erläutert.

Das Element "meta" kann weitere Unterelemente besitzen und daher nimmt die zugehörige Methode wiederum ein Closure als Argument. In diesem Closure können nun laut FHIR-Profil-Definition die Methoden "versionId", "lastUpdated", "source", "profile", "security" und "tag" aufgerufen werden. Die Auto-Vervollständigung sollte in IntelliJ folgendermaßen aussehen:

The screenshot shows two code completion dropdowns from IntelliJ IDEA. The top dropdown is for the 'meta' element of a 'patient' resource, and the bottom one is for the 'meta' element of a 'sec' (security) component. Both dropdowns show method signatures for 'versionId', 'lastUpdated', 'source', 'profile', 'security', and 'tag'. The 'security' method is highlighted in both cases.

```
12 patient {  
13     id = "Patient/" + context.source["patientcontainer.id"]  
14  
15     meta {  
16         profile profile: "http://dktk.dkfz.de/fhir/StructureDefinition/onco-core-Patient-Pseudonym"  
17         ver|  
18             p versionId String  
19             c verlauf projects.dktk  
20             m every() boolean  
21             m every(Closure closure) boolean  
22             m getVersionId() String  
23             m setVersionId(String s) void  
24         Press Eingabe to insert, Tabulator to replace Next Tip  
25     }  
26 }  
27  
12     patient {  
13         id = "Patient/" + context.source["patientcontainer.id"]  
14  
15         meta {  
16             profile profile: "http://dktk.dkfz.de/fhir/StructureDefinition/onco-core-Patient-Pseudonym"  
17             sec|  
18                 m security(Closure<?> closure) void  
19                 p security List<Coding>  
20                 m setCommunication(List<PatientCommunicationCompon... void  
21                 m setContact(List<ContactComponent> list) void  
22                 m setContained(List<Resource> list) void  
23                 m setMetaClass(MetaClass metaClass) void  
24                 m getSecurity() List<Coding>  
25                 m setSecurity(List<Coding> list) void  
26             Press Strg+Leertaste to see non-imported classes Next Tip  
27 }
```

Prinzipiell werden die Methoden entsprechend des zu kreierenden FHIR-Profiles ineinander geschachtelt. Methoden, die einem FHIR-Element von komplexem Typ entsprechen akzeptieren ein Closure als Argument, in welchem genau die korrespondierenden Methoden für die Unterelemente aufgerufen werden können. In der Abbildung oben rechts sehen Sie das Beispiel der Code-Vervollständigung für die Methode "security". Hat ein Element im FHIR-Profil nur einen Wert, so kann dieser direkt

zugewiesen werden. Der entsprechende Aufruf ist in IntelliJ mit einem violett hinterlegten „p“ gekennzeichnet (z.B.: "versionId" in linker Abbildung). Im Falle, dass unter "meta" das Feld "versionId" mit "EXAMPLE-ID" festgelegt werden soll, so sieht der Code wie folgt aus:

```
patient {  
    ...  
    meta {  
        profile "http://dktk.dkfz.de/fhir/StructureDefinition/onco-core-Patient-Pseudonym"  
        versionId = "EXAMPLE-ID"  
    }  
    ...  
}
```

Soll nun das komplexe Element "security" gesetzt werden, so muss ein Closure aufgerufen werden. "[meta.security](#)" ist vom Typ Coding. Die Struktur für ein "Coding" ist [hier](#) definiert. Des Weiteren ist für "Security" ein [ValueSet](#) definiert. Mit dieser Information kann nun die DSL genutzt werden, um das entsprechende Closure bspw. wie folgt aufzurufen:

```
patient {  
    ...  
    meta {  
        profile "http://dktk.dkfz.de/fhir/StructureDefinition/onco-core-Patient-Pseudonym"  
        versionId = "EXAMPLE-ID"  
        security {  
            system = "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality"  
            code = "U"  
        }  
    }  
    ...  
}
```

Dies ist nur ein Beispiel, um den Methodenaufruf mit einem Closure zu demonstrieren. Im eigentlichen Anwendungsfall können selbstverständlich die zugewiesenen Werte von den Daten der CentraXX-Entität abhängen.

### 3.5.2. CXX JPA Meta Model und die Verwendung von context.source

Das Ziel der Mappings ist, die Daten einer CentraXX-Entität auf ein FHIR-Profil abzubilden. Dafür müssen die Daten vom Datenmodell der zu transformierenden CentraXX-Entität abgerufen werden können. Dazu wird der Ausdruck "context.source" verwendet. Das Objekt "context.source" ist eine Repräsentation der CentraXX-Entität in

Form geschachtelter Hash-Maps. Eine Hash-Map ordnet einem Schlüssel (Key) einen Wert (Value) zu. Als Schlüssel wird jeweils der Name der Java JPA Property verwendet. Value ist entweder ein Simple Type (beispielsweise ein String), oder wiederum eine Hash-Map. Diese Struktur ermöglicht es in Groovy, Elemente in Form von geketteten Aufrufen, wie context.source[propertyX.propertyY.propertyZ] abzurufen. Im ersten Beispiel oben ist dieser Ausdruck bereits vorgekommen. Es folgen Beispiele aus diversen Beispielskripten:

```
id = "Patient/" + context.source["patientcontainer.id"]
version = context.source["icdEntry.catalogue.version"]
date = context.source["diagnosisDate.date"]
```

Aktuell liegt noch kein Zugang zur Struktur des Datenmodells vor. Ebenso fehlen aktuell noch die Code-Vervollständigung für die entsprechenden Ausdrücke.

### 3.5.3. Definition eigener Methoden, um CentraXX-Entitäten optimal abzubilden

#### Beispiel 1: Abbildung des CentraXX Gender auf das Gender des DKTk-FHIR-Profil

Es treten Fälle auf, in denen die Daten einer CentraXX-Identität anders strukturiert sind als im zugehörigen FHIR-Profil. Dies hängt bspw. davon ab, welcher Satz an Werten zur Beschreibung eines bestimmten Patienten-Stammdatenpunkts in einer CentraXX-Instanz definiert ist. Betrachten wir z.B. das Element "Gender" im FHIR-Profil im Vergleich zur Definition in CentraXX. Für das FHIR-Profil ist folgender [ValueSet](#) definiert. Nachfolgend wird ein Beispiel für die Dokumentation des Geschlechts eines Patienten in CentraXX und in der FHIR-Ressource "Patient" des DKTk-Projekts aufgeführt:

CentraXX	DKTK FHIR Resource "Patient"
männlich	male
weiblich	female
unbestimmt	unknown
sonstiges	
divers	

Um die Werte optimal zu ordnen zu können, kann eine eigene Methode definiert werden, um das CentraXX-Gender abzubilden. Folgend ein Ausschnitt aus \dktk\patient.groovy:

```

patient {

    ...
    if (context.source["genderType"]) {
        gender = mapGender(context.source["genderType"] as GenderType)
    }
}

```

Mittels if-Statement wird geprüft, ob für den zu transformierenden Patienten-Datensatz überhaupt ein Gender angegeben ist. Dazu wird "context.source" genutzt, um dieses von der CentraXX-Entität abzufragen. Ist das Gender definiert wird der Property "gender" der Wert mit der eigenen Methode "mapGender()" zugewiesen. Diese Methode ist folgendermaßen definiert:

```

static AdministrativeGender mapGender(final Object genderType) {
    switch (genderType) {
        case "MALE":
            return AdministrativeGender.MALE
        case "FEMALE":
            return AdministrativeGender.FEMALE
        case "UNKNOWN":
            return AdministrativeGender.UNKNOWN
        default:
            return AdministrativeGender.OTHER
    }
}

```

Mit einem Switch-Statement können die entsprechenden Fälle zugeordnet werden. Da die zusätzlichen Gender, wie bspw. "divers" nicht im FHIR ValueSet definiert sind, werden diese im Beispiel auf "Other" abgebildet. In diesem Fall bietet die FHIR-Bibliothek ein Enum "AdministrativeGender" an, in welchem die konstanten Werte des ValueSets definiert sind.

### Beispiel 2: Setzen der "identifier" für DKTk FHIR-Profil Patient:

Das Element "identifier" des FHIR-Profils wird folgendermaßen festgelegt. Der folgende Code ist erneut ein Ausschnitt aus dem Beispielskript \dktk\patient.groovy:

```

patient {
    ...
    final def globalId = context.source["patientcontainer.idContainer"]?.find {
        "DKTK" == it["idContainerType"]?.getAt("code") // TODO: site specific
    }

    if (globalId) {
        identifier {
            value = globalId["psn"]
            type {

```

```

        coding {
            system = "http://dktk.dkfz.de/fhir/onco/core/CodeSystem/PseudonymArtCS"
            code = "Global" // TODO: site specific
        }
    }
}
...

```

Zuerst wird einer Variablen "globalId" ein Wert zugewiesen. Groovy unterstützt sowohl statische, als auch dynamische Typisierung. In diesem Fall wird "globalId" dynamisch typisiert. Sie nimmt also den Typ an der Ihr zu Laufzeit zugewiesen wird. In Groovy wird dazu das Keyword "def" verwendet.

Mittels des "?"-Operator (siehe <https://groovy-lang.org/operators.html# safe navigation operator>) wird überprüft, ob überhaupt eine Property "patientcontainer.idContainer" vorhanden ist. Im Falle, dass diese vorhanden ist, so generiert context.source["patientContainer.idContainer"] eine Liste zurück. Diese Liste enthält wiederum geschachtelte Maps (siehe <http://groovy-lang.org/groovy-dev-kit.html#Collections-Maps>). In dieser Liste wird nach einem Element (also einer Map) gesucht, welches als Key die Property "idContainerType" besitzt. Da in CentraXX ein Patient prinzipiell mehrere IdContainer besitzen kann, wird das Ergebnis im .find Ausdruck weiter nach dem jeweiligen idContainertypeType mit dem "code"="DKTK" gefiltert, um zu einem eindeutigen Ergebnis zu gelangen. Ist dies wiederum der Fall, so wird die Variable "globalId" mit dem Ergebnis, der Map, welche den IdContainer representiert, belegt. Wird keine passende Map gefunden bleibt "globalId" gleich null.

Der zweite Code-Abschnitt wird nur ausgeführt, wenn „globalId“ ungleich null ist, sprich eine entsprechende Map existiert. Hierbei wird die Methode "identifier" des FHIR-Modells für den Zusammenbau eines Patienten aufgerufen. Dem Element "value" in "identifier" wird nun der Value aus der Map zum Key der Property "psn", der vorher definierten Variablen "globalId" zugewiesen.

## 4. FHIR-Export in Zielsysteme

Für die folgenden Beispiele wurde ein Projekt-Verzeichnis unter "[centraxx-home]\nfn-mappings\dktk" angelegt. Innerhalb dieses wurden alle Groovy-Skripte aus dem Beispielprojekt (s. oben) abgelegt.

<input type="checkbox"/>	Name	Größe	Dateierweiterung
	tnmp	5 KB	.groovy
	specimen	5 KB	.groovy
	ExportResourceMappingConfig	4 KB	.json
	ProjectConfig	4 KB	.json
	verlauf	3 KB	.groovy
	vitalstatus	3 KB	.groovy
	systemtherapie	3 KB	.groovy
	patient	3 KB	.groovy
	grading	3 KB	.groovy
	histologie	2 KB	.groovy
	fernmetastasen	2 KB	.groovy
	tumorstatusMetas	2 KB	.groovy
	tumorstatusGesamt	2 KB	.groovy
	tumorstatusLymph	2 KB	.groovy
	tumorstatusLokal	2 KB	.groovy
	fall	2 KB	.groovy
	operation	2 KB	.groovy
	residualstatusLokal	2 KB	.groovy
	residualstatusGlobal	2 KB	.groovy
	condition	2 KB	.groovy
	strahlentherapie	2 KB	.groovy
	BundleRequestMethodConfig	1 KB	.json
	organisation	1 KB	.groovy

Abbildung 3: Projektverzeichnis

Die Konfigurationsdatei ExportResourceMappingConfig.json wurde für dieses Beispiel auf dem Standard-Zustand belassen (so wie sie nach dem ersten Start von CentraXX nach Anlegen des Projekt-Ordners von CentraXX erstellt wurde).

Es wurden drei Testpatienten in CentraXX angelegt. Des Weiteren wurde die Patienten-ID mit dem Code "DKTK" in CentraXX definiert. Diesen drei Testpatienten wurde eine solche "DKTK"-ID zugewiesen. Somit kann ein passender Patienten-Filter konfiguriert werden:

```
"patientFilterType": {
  "description": "...",
  "value": "IDTYPE"
},
"patientFilterValue": {
  "description": "The filter value.",
  "value": "DKTK"
},
```

Zum Testen ist es hilfreich, wenn Ausleitungen zeitnah stattfinden. Dazu wird für die folgenden Beispiele ein Exportintervall auf alle fünf Minuten konfiguriert:

```
"exportInterval": {  
  "description": "Sets the export cron interval. Default is once a day.",  
  "value": "0 */5 * * *"  
},
```

Ein Beispiel für ein ausgeleitetes FHIR-Bundle der FHIR-Ressource Patient finden Sie im Anhang.

## 4.1. Ausleitung in einen Blaze Store

FHIR-Ressourcen können in einen Blaze-Store ausgeleitet werden. Für dieses Beispiel wird das "standalone JAR"-Blaze verwendet. Hinweise zur Installation finden Sie unter <https://alexanderkiel.gitbook.io/blaze/> und unter <https://github.com/samply/blaze>. Zusätzlich wird ein weiteres Command-Line-Tool verwendet, mit dem im nachfolgenden Beispiel die Anzahl der Ressourcen im Blaze-Store abgefragt werden können. Hinweise zur Installation und Nutzung von Blaze-CTL finden Sie unter <https://github.com/samply/blazectl>.

Blaze bietet eine REST-full API standardmäßig unter `http://localhost:8080/fhir` an. Für einen Export in den Blaze-Store müssen die Konfigurationen in `ProjectConfig.json` (spezifische Erläuterung im Abschnitt "Einrichtung eines Projekts") angepasst werden. Der Export per HTTP muss aktiviert und die Adresse des Zielsystems festgelegt werden.

```
"uploadToUrl": {  
  "description": "If true, the scheduler will export to the specified uploadUrl REST endpoint.",  
  "value": true  
},  
"uploadUrl": {  
  "value": "http://localhost:8080/fhir"  
},
```

Außerdem werden für diesen Test alle Zertifikate zugelassen:

```
"sslTrustAllEnable": {  
  "description": "If true, all ssl/tls certificates are trusted, otherwise the default java store is used for SSL/TLS verification.",  
  "value": true  
},
```

Für erste Testzwecke ist es sinnvoll das Login der HTTP-Antwort des Zielservers zu aktivieren:

```
"prettyPrintEnable": {  
  "description": "Print style the HTTP message body.",  
  "value": true  
},
```

```
"fhirResponseValidationEnable": {  
    "description": "If true, the HTTP message responses is parsed and each response entry is validated against its FHIR response status. Even if the HTTP response status is 200 ok, the status of a single entry might be 400 (bad request). If the status is not 200 or 201, an error is logged.",  
    "value": true  
}
```

Die hier nicht aufgeführten Konfigurationen werden bei dem Standard-Werten belassen. Der Patientenfilter und das Ausleitungsintervall sind, wie oben beschrieben, konfiguriert.

Die Konfigurationsdatei BundleRequestMethodConfig.json kann auf dem Standard-Zustand belassen werden. Standardisiert werden für alle FHIR-Ressourcen-Typen die PUT-Methode verwendet. Da Blaze ausschließlich PUT akzeptiert, bedarf es hier keiner Modifizierung.

CentraXX muss nun neu gestartet werden, um den neu konfigurierten Export zu aktivieren. Davor kann bereits Blaze selbst gestartet und eine erste Abfrage über die Anzahl der Ressourcen in Blaze getätigt werden. Dazu muss der folgende Befehl in einer Windows-PowerShell ausgeführt werden:

```
PS C:\Users\          > blazectl --server http://localhost:8080/fhir count-resources  
Count all resources on http://localhost:8080/fhir ...  
  
-----  
total : 0
```

Wie erwartet sind noch keine FHIR-Ressourcen in Blaze vorhanden. Nachdem CentraXX wieder gestartet ist, sollten bei einer erfolgreichen Konfiguration Einträge zum Export im Serverlog erhalten werden. Als Beispiel werden die Einträge für einen Export eines CentraXX-Patienten aufgeführt:

```
2021-01-14 20:25:01,503 INFO [de.kairos.centraxx.timer.NfnExportScheduler] (cxxScheduledTask-19)  
Select CXX EntityType 'PATIENT_MASTER' transform by template 'vitalstatus' export to FHIR resource  
'Observation'  
2021-01-14 20:25:01,565 INFO [de.kairos.centraxx.fhir.r4.nfn.NfnExportManager] (cxxScheduledTask-19)  
Export bundle with '3' resources to target system 'http://localhost:8080/fhir'  
2021-01-14 20:25:01,568 INFO [de.kairos.centraxx.fhir.r4.nfn.NfnClient] (cxxScheduledTask-19) Cxx POST  
request: http://localhost:8080/fhir  
2021-01-14 20:25:01,608 INFO [de.kairos.centraxx.fhir.r4.nfn.NfnClient] (cxxScheduledTask-19) Cxx  
response: 200
```

Für diesen Test sind in CentraXX genau drei Patienten vorhanden. Es existieren noch weitere Entitäten, welche exportiert wurden. Eine erneute Abfrage der Anzahl von FHIR-Ressourcen in Blaze ergibt das folgende Ergebnis:

```
PS C:\Users\          > blazectl --server http://localhost:8080/fhir count-resources
Count all resources on http://localhost:8080/fhir ...
Condition           : 1
Encounter           : 1
Observation         : 3
Organization        : 1
Patient             : 3
-----
total               : 9
```


## 4.2. Ausleitung ins Dateisystem

Die aus dem Transformations-Vorgang entsprungenen FHIR-Ressourcen können in Form von JSON-Dateien in das lokales Dateisystem ausgeleitet werden. Dazu müssen verschiedene Konfigurationen in der ProjectConfig.json vorgenommen werden. Der Export muss aktiviert und ein Zielverzeichnis festgelegt werden. Dieses Zielverzeichnis wird neu angelegt, im Falle, dass es nicht bereits existiert:

```
"exportToFileSystem": {
  "description": "If true, the scheduler will export to the specified file system exportFolder.",
  "value": true
},
"exportFolder": {
  "value": "C:/applications/centraxx-home/nfn-export/test-export"
},
```

Darüber hinaus relevante Konfiguration wie "patientFilterType", "patientFilterValue", "exportInterval" sind, wie oben beschrieben, vorgenommen worden.

Nach Neustart von CentraXX werden die JSON-Dateien im angegebenen Verzeichnis angezeigt:

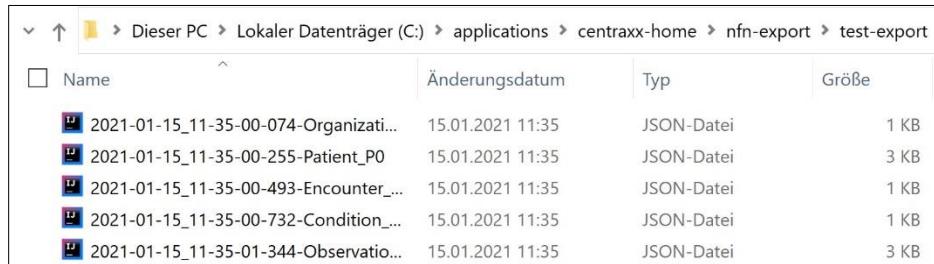

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the following details:

- Path: Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > applications > centraxx-home > nfn-export > test-export
- File List:
 

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
2021-01-15_11-35-00-074-Organizati...	15.01.2021 11:35	JSON-Datei	1 KB
2021-01-15_11-35-00-255-Patient_P0	15.01.2021 11:35	JSON-Datei	3 KB
2021-01-15_11-35-00-493-Encounter_...	15.01.2021 11:35	JSON-Datei	1 KB
2021-01-15_11-35-00-732-Condition_...	15.01.2021 11:35	JSON-Datei	1 KB
2021-01-15_11-35-01-344-Observatio...	15.01.2021 11:35	JSON-Datei	3 KB

Abbildung 4: JSON-Dateien innerhalb des Verzeichnisses

# 5. Anhang

## Beispiel für ausgeleitetes FHIR-Bundle für die FHIR-Ressource "Patient":

```
{  
  "resourceType": "Bundle",  
  "type": "transaction",  
  "total": 3,  
  "entry": [ {  
    "fullUrl": "Patient/1",  
    "resource": {  
      "resourceType": "Patient",  
      "id": "1",  
      "meta": {  
        "versionId": "EXAMPLE-ID",  
        "profile": [ "http://dktk.dkfz.de/fhir/StructureDefinition/onco-core-Patient-Pseudonym" ],  
        "security": [ {  
          "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality",  
          "code": "U"  
        } ]  
      },  
      "identifier": [ {  
        "type": {  
          "coding": [ {  
            "system": "http://dktk.dkfz.de/fhir/onco/core/CodeSystem/PseudonymArtCS",  
            "code": "Global"  
          } ]  
        },  
        "value": "DKTK-43134"  
      } ],  
      "gender": "female",  
      "birthDate": "2020-01-01"  
    },  
    "request": {  
      "method": "PUT",  
      "url": "Patient/1"  
    }  
, {  
    "fullUrl": "Patient/2",  
    "resource": {  
      "resourceType": "Patient",  
      "id": "2",  
      "meta": {  
        "versionId": "EXAMPLE-ID",  
        "profile": [ "http://dktk.dkfz.de/fhir/StructureDefinition/onco-core-Patient-Pseudonym" ],  
        "security": [ {  
          "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality",  
          "code": "U"  
        } ]  
      },  
      "identifier": [ {  
        "type": {  
          "coding": [ {  
            "system": "http://dktk.dkfz.de/fhir/onco/core/CodeSystem/PseudonymArtCS",  
            "code": "Global"  
          } ]  
        },  
        "value": "DKTK-43134"  
      } ],  
      "gender": "female",  
      "birthDate": "2020-01-01"  
    }  
  ]  
}
```

```
"coding": [ {
    "system": "http://dktk.dkfz.de/fhir/onco/core/CodeSystem/PseudonymArtCS",
    "code": "Global"
} ],
},
"value": "DKTK-98521"
} ],
"gender": "male",
"birthDate": "1956-01-01"
},
"request": {
    "method": "PUT",
    "url": "Patient/2"
}
}, {
"fullUrl": "Patient/11",
"resource": {
    "resourceType": "Patient",
    "id": "11",
    "meta": {
        "versionId": "EXAMPLE-ID",
        "profile": [ "http://dktk.dkfz.de/fhir/StructureDefinition/onco-core-Patient-Pseudonym" ],
        "security": [ {
            "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality",
            "code": "U"
        } ]
    },
    "identifier": [ {
        "type": {
            "coding": [ {
                "system": "http://dktk.dkfz.de/fhir/onco/core/CodeSystem/PseudonymArtCS",
                "code": "Global"
            } ]
        },
        "value": "DKTK-42313"
    } ],
    "gender": "other",
    "birthDate": "1993-01-01",
    "deceasedDateTime": "2021-01-01"
},
"request": {
    "method": "PUT",
    "url": "Patient/11"
}
}
}]
```